




電子カルテ画像表示モニターソリューション

RadiForce® MX-Series

Making Each Life Visual

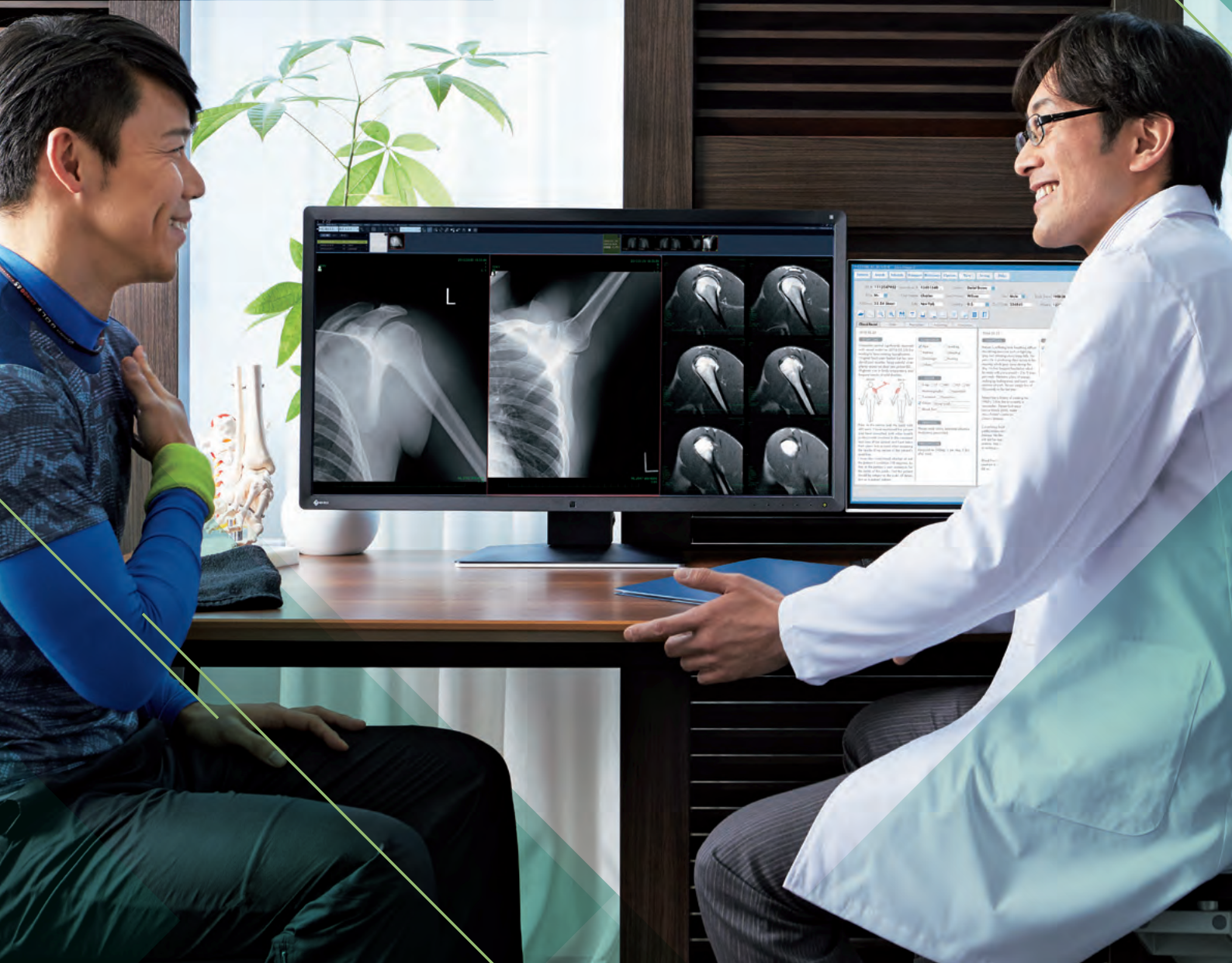

Making Each Life Visual

プレジジョン・メディシン。

一人ひとりのいのちにどこまでも向き合い、寄り添っていく。
そんな医療がこれからの時代の担い手になろうとしています。

進化を迫られる医療の現場で、これからもっと求められるもの。
それは、詳細な情報をより精密に映し出す技術であり、
巨大化する情報の渦を、まとめて、つないで、生かす能力です。

かけがえのないいのちを守り抜くために、
あらゆる情報を、より正確に、鮮明に、スピーディに。
まつわる作業を、もっと集約的に、効率的に、そして安全に。

Making Each Life Visual
その先の笑顔のために。



RadiForce® MX-Series

DICOM® Part 14準拠のキャリブレーションに対応したコストパフォーマンスに優れたモニターです。電子カルテやレポート情報とともに放射線画像などの医用画像データがDICOM Part 14で表示可能。さまざまな導入ニーズに応えるため、ワイドからスクエアまで各種画面サイズや解像度、さらにはマルチタッチ対応など、バリエーションを豊富に取り揃えています。



医用画像を忠実に再現

階調特性がDICOM Part 14に準拠するように、工場で1台1台調整し出荷しています。さらに、システム起動後、素早く輝度を安定させる機能と、周囲の温度や経時による輝度変化を自動補正する機能を搭載。安定した輝度と階調で医用画像を忠実に再現できます。


・MS236WT-Aは、階調特性がDICOM Part 14に対応するように、工場で調整し、簡易DICOMモードとしてモニター内部に保存し出荷しています。



経年変化を補正

モニター品質管理ソフトウェア簡易版RadiCS LE(同梱)によって、モニターのバックライトセンサーを利用したDICOM Part 14準拠の簡易キャリブレーションが実行でき、輝度と階調を補正します。


・MS236WT-Aは対応しておりません。

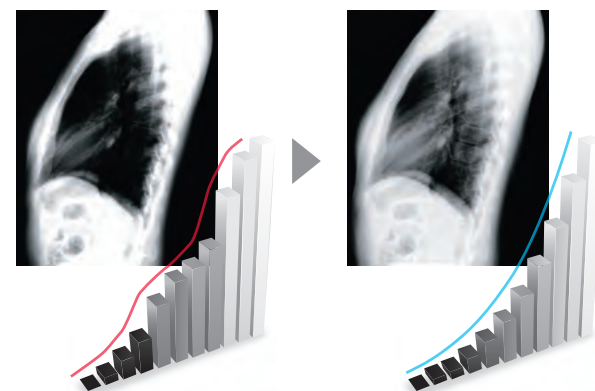

画面全体の輝度が均一

EIZO独自の技術を活かしたDigital Uniformity Equalizer (DUE)機能は、液晶モニターの特性上これまで困難であった表示画面上の輝度均一性を向上させます。


・MS236WT-Aは対応しておりません。

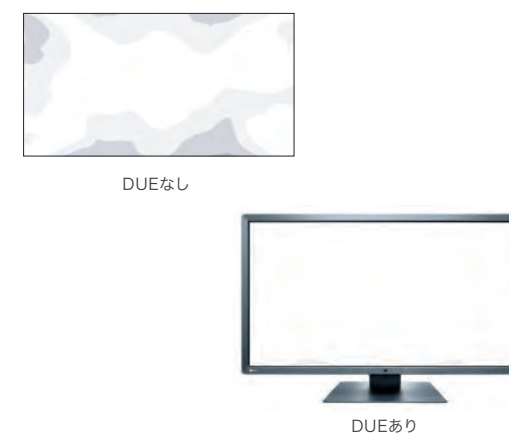

各種モダリティ画像を違和感なく見る

毎回キャリブレーションすることなく、CRや内視鏡など表示画像の種類ごとに最適な表示モードに切替えができるCAL Switch機能を搭載。モニター品質管理ソフトウェア簡易版RadiCS LE(同梱)を使ってアプリケーションごとに表示モードの自動切替えを行うこともできます。

・選択できるモードの種類と数は機種によって異なります。詳しくは、P.13-14の仕様一覧をご確認ください。

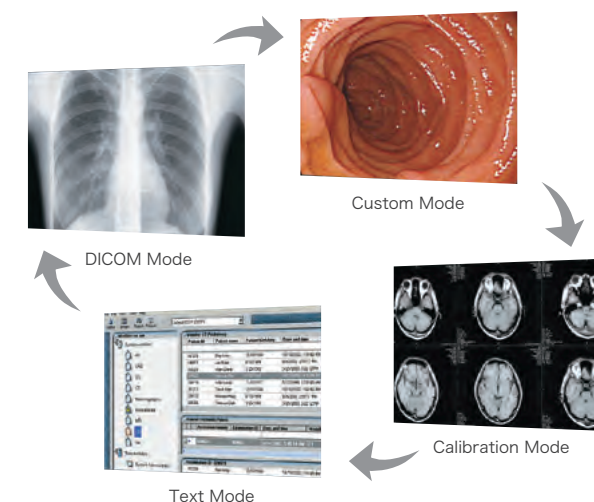



8MP MX315W
31.1型カラー液晶モニター



「読影」の新しいスタイル

医用画像撮影装置(モダリティ)のデジタル化や性能向上により、放射線科読影医1人当たりの読影件数は増加傾向にあります。増加する読影医の負担を軽減するため、読影環境を快適にし、読影ワークフローを円滑にするEIZO独自のWork-and-Flow機能を開発しました。RadiForce MX315Wと同梱ソフトウェアRadiCS LEとの組み合わせで、Work-and-Flow機能を利用できます。

Work-and-Flow



「読影がもっと楽になる」各種機能をアニメーションで分かりやすく解説
<https://www.eizo.co.jp/i/workandflow/>

見たい時だけ表示

Hide-and-Seek機能により、操作しないPinP(ピクチャー・イン・ピクチャー)子画面は隠れておき、必要になったらカーソルを画面の端に移動するだけで表示できます。読影レポート、検査リスト、画像ビューワ、電子カルテなど異なる画面やPCを行き来する読影ワークフローの作業効率を損わずにモニター数を削減でき、読影環境の省スペース化が可能です。

・機能搭載の有無は、P.13-14の仕様一覧をご確認ください。



途切れない操作


Switch-and-Go機能により、USB切替えがモニター内で行われ、2台のPCを1組のキーボードとマウスで操作できます。操作したいPCの画面にカーソルを移動するだけで、瞬時に操作先を切替えられます。PCの行き来に生じるキーボードとマウスの使い分けが不要になり、読影効率の向上と、さらなる省スペース化が図れます。

・機能搭載の有無は、P.13-14の仕様一覧をご確認ください。




超高解像度で作業を効率化

MX315Wは、RadiForce MX-Series史上最高となる、超高解像8メガピクセルモニターです。対角31.1型の大画面に、横4096×縦2160ドット(約800万画素)の情報量を表示できます。医療現場では、電子カルテシステムや医用画像管理システム(PACS)など、さまざまなシステムと連携しモニターを利用するため、複数のアプリケーションやウィンドウを同時表示することが多くなります。レイアウトの自由度が高いMX315Wを活用することで、CTやMRI画像のタイル表示や、過去と現在に行った検査画像の比較など、さまざまな検査画像を並べて表示でき、作業効率が向上します。

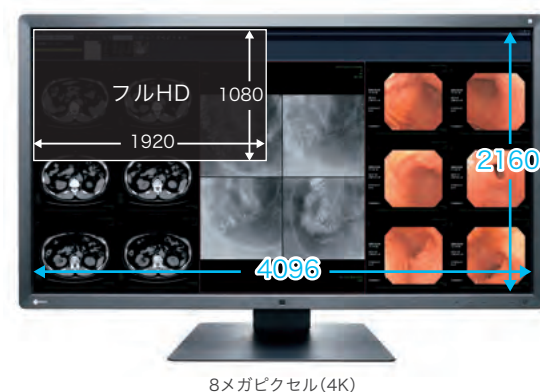

省スペース・軽量設計で快適な作業空間

MX315Wは、大画面ながら電源内蔵のスリム設計で、外形の奥行きを225 mmに抑えました。設置場所を取らず、卓上が有効に使えるので、快適な作業環境が得られます。また質量についても、電源をモニター部に内蔵しつつも、11.7 kgの軽量設計を実現しました。持ち運びが容易であり、設置時の負担を軽減します。

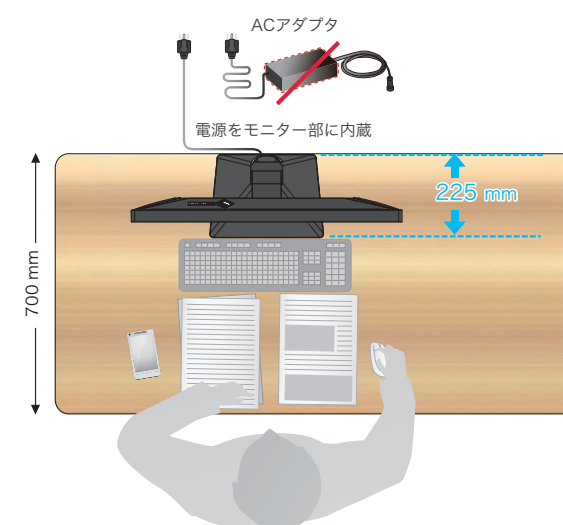



2MP MX217
21.3型カラー液晶モニター



2.3MP MX243W
24.1型カラー液晶モニター



1MP MX194
19.0型カラー液晶モニター

Work-and-Flow



「読影がもっと楽になる」各種機能を
アニメーションで分かりやすく解説

<https://www.eizo.co.jp/i/workandflow/>

すばやく集中

Point-and-Focus機能により、マウスとホットキーの操作だけで、表示している医用画像内の気になる部分をすばやく選択し、輝度や階調を見やすいように変更できます。関心領域のみに焦点を絞ることで、読影に集中しやすくなります。


・機能搭載の有無は、P.13-14の仕様一覧をご確認ください。



モノクロとカラーをハイブリッド表示

Hybrid Gamma PXL機能が、同一画面内のモノクロとカラーをピクセルごとに自動判別し、それぞれ最適な階調で表示、すなわちハイブリッド表示します。これによりX線写真やMRI、CTのモノクロ画像はDICOM Part 14に対応した階調で、内視鏡や超音波、核医学などのカラー画像はガンマ2.2に対応した階調で忠実に再現でき、モノクロとカラー画像を一つの画面上に表示する際の読影作業の効率化が期待できます。

・機能搭載の有無は、P.13-14の仕様一覧をご確認ください。

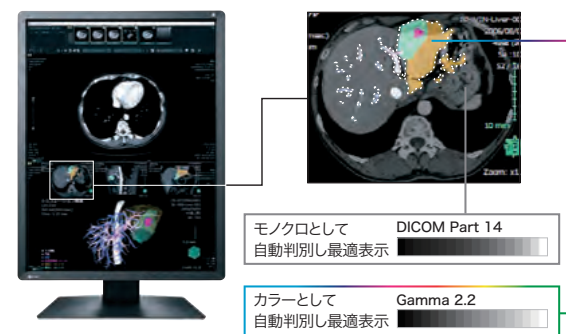

表示品質の管理が容易

MX315WとMX217は、ベゼル部に測定センサー Integrated Front Sensor (IFS) を内蔵しています。取付け取外しの時間と手間をかけず、さらにタスク実行中は最小限の表示範囲で、DICOM Part 14準拠のキャリブレーションを実現します。



内蔵キャリブレーションセンサーなし



Integrated Front Sensorあり

表示画像に合わせて縦・横自由自在

MX217に、モニター品質管理ソフトウェア簡易版RadiCS LE (同梱) をインストールし設定すると、Image Rotation Plus機能とモニターに搭載した重力センサーの連動により、モニター部の縦・横方向に合わせて画面表示が自動で切替わります。




縦から横に切替え



横から縦に切替え

マルチタッチパネルモニター

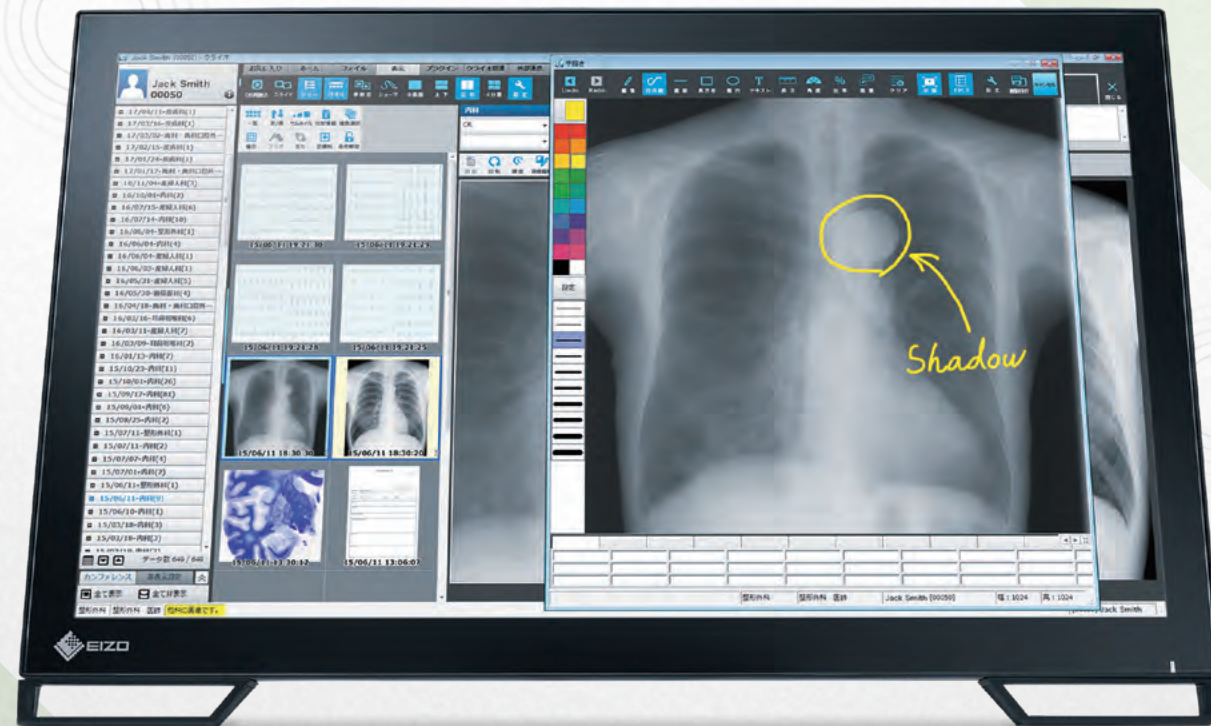

2MP MS236WT-A
23.0型タッチパネル装着カラー液晶モニター



カラー：セレーングレイ



カラー：ブラック

スタイラスペン対応で、なめらかな書き味

投影型静電容量(PCAP)方式採用で、画面の透過率が良く、ドラッグやフリック等のタッチ操作がスムーズです。付属のパッシブ方式のタッチペン入力に加え、アクティブ方式のスタイラスペンを使った入力にも対応。電子カルテ上に、文字やシェーマ(図式)など細やかな入力も可能です。

市販のアクティブ方式のスタイラスペンを含む、複数のスタイラスペンと互換性検証済みです。

<https://www.eizo.co.jp/i/stylus/>



誤動作なく、手をついたまま書ける

10点までの指やタッチペンでの同時タッチに対応し、複数人で同時に書き込みができます。また、指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効化し、手の側面がタッチパネルに触れた状態で操作する場合において誤入力を防ぐ「パームリジェクション機能」を搭載。マルチタッチの誤動作を防ぎ、書くことに集中できます。

・パームリジェクション機能は 2×2 cm以上の面積で有効となります。



タッチ操作が快適なフルフラットデザイン


ベゼル(画面の外枠)に凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作しやすく、ドラッグやフリック等のスライド操作も滑らかに行えます。液晶画面に付いたホコリや指紋の汚れも拭き取りやすく、清潔に保つことができます。



好みの角度で快適に使える


レイドバックスタンドを採用しているMS236WT-Aは、広範囲にチルト角を調整できます。タッチ操作では立てて、タッチペン操作では寝かせるなど、使い方にあった作業しやすい画面角度で作業できます。

MS236WT-A以外のモニターは、可動範囲の広い昇降、チルト、スウィーベルに対応。ユーザー1人1人に合った、作業しやすい最適な画面位置へ調整できます。

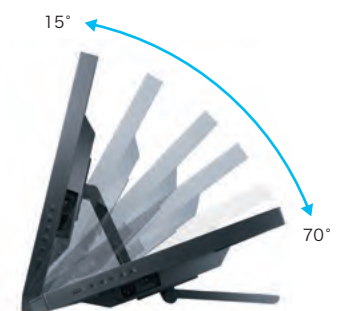

病院に最適なモニター品質管理の手法

医療の現場では、高度な品質管理が求められます。モニター1台1台の経時変化を検知・補正し、院内各所に設置された膨大なモニターを管理する必要があります。
EIZOは、「Visual Technology Company」として長年培った経験とノウハウをもとに、モニター品質管理の最適な手法をご提案します。

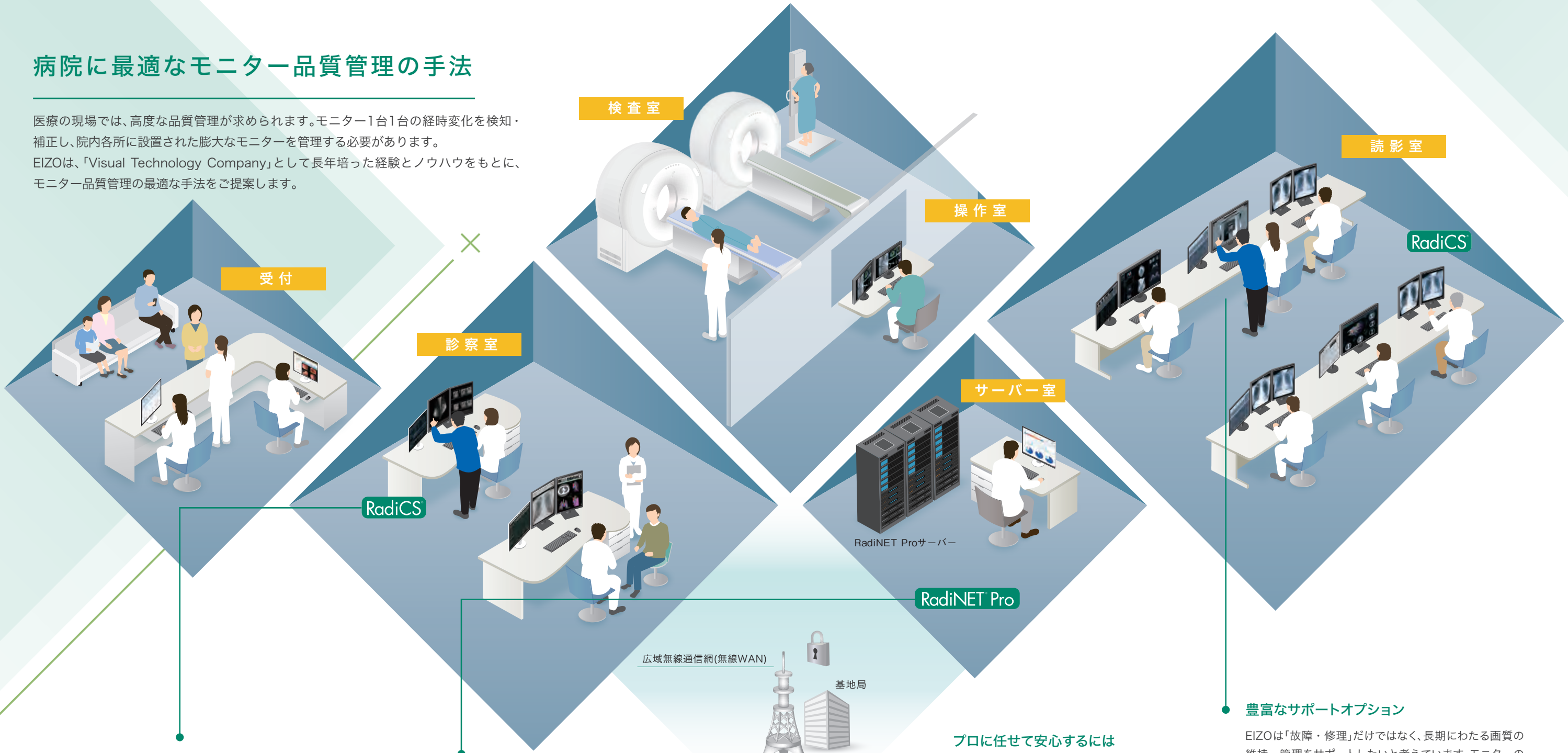

個々のモニターを品質管理するには

各クライアントモニターの品質維持・管理を、キャリブレーションから受入・不変性試験、履歴・資産管理まで、ガイドラインに則して実現するには、知識と経験が要求されます。EIZOは、品質管理を分かりやすい手法で実現するソフトウェアと測定センサーをご提案します。

モニター品質管理ソフトウェア&キャリブレーションセンサー

RadiCS® UX2



大量のモニターを品質管理するには

院内に設置された大量のモニターを管理するためには多くの労力が求められます。EIZOは、院内サーバーとネットワークを活用した、効率的な一元管理をご提案します。

ネットワーク品質管理ソフトウェア

RadiNET® Pro



EIZO

RadiNET Pro Guardian



プロに任せて安心するには

院内にモニター管理用のサーバーを導入し、自ら運用・保守を行うには費用と労力が発生します。EIZOは、インターネットとは隔離されたセキュアな閉域網でサーバーと安全に接続し、プロのサポートを味方に、モニター品質管理を安心運用できるサービスをご提案します。

品質管理トータルケア

RadiNET® Pro Guardian

・インターネット経由で接続するサービスRadiNET Pro Web Hostingもあります。



豊富なサポートオプション

EIZOは「故障・修理」だけではなく、長期にわたる画質の維持・管理をサポートしたいと考えています。モニターの初回設置から、モニター品質管理ソフトウェアRadiCSを用いた定期的な試験やキャリブレーションなど、プロの技術と経験に裏付けられたサポートを提供することで、ユーザーの負担削減を図ります。

サポートオプション例

- | | |
|--------------|-------------|
| ■ 初回設置 | ■ 導入後 |
| ・モニターのセットアップ | ・不変性試験 |
| ・受入試験 | ・定期的なモニター点検 |
| ・キャリブレーション | ・キャリブレーション |



仕様一覧

製品バリエーション		—	—	—	—	MS236WT-ALGY: スタンドあり, セレーングレイ MS236WT-ALBK: スタンドあり, ブラック MS236WT-AFGY: スタンドなし, セレーングレイ MS236WT-AFBK: スタンドなし, ブラック
パネル	種類	カラー (IPS)	カラー (IPS)	カラー (IPS)	カラー (VA)	カラー (IPS)
	バックライト	LED	LED	LED	LED	LED
	サイズ	31.1型 (79.0 cm)	24.1型 (61 cm)	21.3型 (54.0 cm)	19.0型 (48.1 cm)	23.0型 (58.0 cm)
	推奨解像度	4096 x 2160 (アスペクト比17:9)	1920 x 1200 (アスペクト比16:10)	1200 x 1600 (アスペクト比3:4)	1280 x 1024 (アスペクト比5:4)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
	表示領域 (横 x 縦)	697.9 x 368.0 mm	518.4 x 324.0 mm	324.0 x 432.0 mm	376.3 x 301.0 mm	509.2 x 286.4 mm
	画素ピッチ	0.1704 x 0.1704 mm	0.270 x 0.270 mm	0.270 x 0.270 mm	0.294 x 0.294 mm	0.265 x 0.265 mm
	表示色	10-bit (DisplayPort™): 約10.7億色 (約5430 億色中 / 13-bit) 8-bit: 約1677万色 (約5430億色中 / 13-bit)	10-bit (DisplayPort): 約10.7億色 (約5430 億色中 / 13-bit) 8-bit: 約1677万色 (約5430億色中 / 13-bit)	10-bit (DisplayPort): 約10.7億色 (約5430 億色中 / 13-bit) 8-bit: 約1677万色 (約5430億色中 / 13-bit)	10-bit (DisplayPort): 約10.7億色 (約5430 億色中 / 13-bit) 8-bit: 約1677万色 (約5430億色中 / 13-bit)	8-bit: 約1677万色 (約10億6433万色中 / 10-bit)
	視野外角 (水平 / 垂直, 標準値)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	輝度 (標準値)	450 cd/m ²	410 cd/m ²	500 cd/m ²	350 cd/m ²	260 cd/m ²
	キャリブレーション推奨輝度	270 cd/m ²	180 cd/m ²	270 cd/m ² , 180 cd/m ²	180 cd/m ²	—
タッチパネル	コントラスト比 (標準値)	1300:1	1350:1	1800:1	2000:1	1000:1
	応答速度 (標準値)	20 ms (黒→白→黒)	22 ms (黒→白→黒)	20 ms (黒→白→黒)	20 ms (黒→白→黒)	11 ms (中間階調域)
	方式	—	—	—	—	投影型静電容量
	同時タッチ点数	—	—	—	—	10
	表面処理	—	—	—	—	アンチグレア
	通信方式	—	—	—	—	USBシリアル転送
	表面硬度	—	—	—	—	5 H
	対応OS	—	—	—	—	Windows 11, Windows 10 / 8.1 (64-bit, 32-bit)
	映像信号	入力端子	DisplayPort x 2, デュアルリンクDVI-D	DisplayPort, DVI-D	DisplayPort, DVI-D, D-Sub 15 ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI® (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
	出力端子	DisplayPort (デジジェーション)	DisplayPort (デジジェーション)	DisplayPort (デジジェーション)	—	—
USB	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 134 kHz / 14 - 61 Hz	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 100 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 64 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz
	アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	—	—	—	24.8 - 80 kHz / 50 - 75 Hz	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
	同期信号	—	—	—	セパレート	セパレート
	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 2.0: Type-B x 2	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 5Gbps: Type-B
電源	USBハブ (ダウンストリーム)	USB 2.0: Type-A x 3	USB 2.0: Type-A x 2	USB 2.0: Type-A x 2	—	USB 5Gbps: Type-A x 2
	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	標準消費電力	67 W	24 W	20 W	15 W	15 W
	最大消費電力	125 W	56 W	54 W	28 W	47 W
内蔵センサー	節電時消費電力	1.6 W以下	0.6 W以下	0.6 W以下	0.6 W以下	0.5 W以下
	バックライトセンサー, Integrated Front Sensor, 人感センサー, 照度センサー	バックライトセンサー, Integrated Front Sensor, 人感センサー, 照度センサー	バックライトセンサー	バックライトセンサー, Integrated Front Sensor, 照度センサー	バックライトセンサー	—
	主な機能	調光機能 (輝度ドリフト補正, 輝度自動制御)	有	有	有	—
	デジタルユニフォミティ補正	有	有	有	有	—
機構	Hybrid Gamma PXL	—	有	有	—	—
	Work-and-Flow	Hide-and-Seek, Switch-and-Go, Point-and-Focus	Point-and-Focus	Point-and-Focus	—	—
	表示モード	CAL Switch機能 (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)	CAL Switch機能 (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)	CAL Switch機能 (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)	CAL Switch機能 (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)	User1, User2, sRGB, DICOM
	質量	約11.7 kg	約7.8 kg	約7.2 kg	約6 kg	約6.6 kg
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	質量 (モニター部)	約7.5 kg	約4.9 kg	約4.3 kg	約4.2 kg	約6 kg
	取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
	FDA	510(k) Clearance for General Radiography	510(k) Clearance for General Radiography	申請前 510(k) Clearance for General Radiography	510(k) Clearance for General Radiography	Class I
	専用ソフトウェア	モニター品質管理ソフトウェア RadiCS	対応	対応	対応	—
主な付属品	映像信号ケーブル	デュアルリンクDVI-D (3 m), DisplayPort (3 m) x 2, DisplayPort (0.28 m)	DisplayPort (2 m)	DisplayPort (2 m)	DVI-D (2 m)	DisplayPort (2m), HDMI (2m)
	その他 (ユーティリティディスクの内容は変更となる場合があります。)	2芯アダプタ付電源コード (3 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (3 m) x 2, ユーティリティディスク (RadiCS LE, 設定マニュアル), 出荷試験報告書, 保証書付き取扱説明書	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), ユーティリティディスク (RadiCS LE, 取扱説明書, 設定マニュアル), 出荷試験報告書, 保証書付き取扱説明書	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), ユーティリティディスク (RadiCS LE, 取扱説明書, 設定マニュアル), 出荷試験報告書, 保証書付き取扱説明書	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), ユーティリティディスク (RadiCS LE, 取扱説明書, 設定マニュアル), 出荷試験報告書, 保証書付き取扱説明書	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), タッチペン, タッチペンホルダー, ユーティリティディスク (取扱説明書, タッチパネルドライバ, TPOffset), クリーニングクロス, 保証書付き取扱説明書, 意匠シート x 2 (MS236WT-AL), VESAマウント用取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4 (MS236WT-AF), ケーブルランバー
	保証期間	5年間	5年間	5年間	5年間	3年間
	寸法図 (単位: mm)	5年間	5年間	5年間	5年間	3年間
寸法図 (単位: mm)	スワイヤベル	5年間	5年間	5年間	5年間	3年間
	MX315W, MX243W, MX217	5年間	5年間	5年間	5年間	3年間
	MX194	5年間	5年間	5年間	5年間	3年間
	・MS236WT-Aはスワイヤベル非対応	5年間	5年間	5年間	5年間	3年間

・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.eizo.co.jp/i/jmoss/> をご覧ください。

輝度の維持保証

製品ごとに定められた使用時間内であれば、それぞれ定められた輝度 (MX315W: 270 cd/m², MX243W / MX217 / MX194: 180 cd/m²)の維持を保証します。JESRA X-0093 に対応したモニターとして長期間安心してご使用いただけます。

・MS236WT-Aは対応しておりません。



安心・安全

医療の現場で安心してご使用いただけるよう、各種医療規格や安全/EMC規格を取得し、安全性と信頼性を実現しています。



また、(一社)日本画像医療システム工業会(JIRA)規格である「医用画像表示用モニタの品質管理に関するガイドラインJESRA X-0093」の受入試験を製造工程で実施します。その「出荷試験報告書」を製品に同梱することにより、お客様のモニター品質管理作業の負担を軽減します。

・MS236WT-Aは対応しておりません。



長期保証

EIZOのモニター5年間保証は、厳しい品質管理に裏打ちされた保証制度です。単に代替製品に取替えるだけの対応ではない、故障やトラブルが少ない真の5年間保証を実現。仮に故障やトラブルが発生した場合も、ご購入から5年間、修理に関する費用は無償です。

・修理の際は、お客様より製品を宅配便にて送っていただくセンドバック方式となります。保証期間内の送料は当社にて負担します。
・修理期間中は、貸出機を無償お貸出しします。保証期間外の貸出機の送料につきましてはお客様のご負担となります。
・MS236WT-Aは3年間保証です。



製品保証 期間	5年間保証				3年間保証
	MX315W	MX243W	MX217	MX194	MS236WT-A
製品本体	ご購入日から5年間				ご購入日から 3年間
LCDパネル	ご購入日から3年間				
輝度保証	270 cd/m ²	180 cd/m ²			—
	3年間かつ製品使用 10000時間以内	3年間かつ製品使用 15000時間以内	3年間かつ製品使用 20000時間以内	3年間かつ製品使用 10000時間以内	

グラフィックスボード

EIZO推奨のグラフィックスボードは、RadiForceモニターとの動作検証を行った専用ドライバを付属しています。
高い信頼性と確実な運用が求められる院内システムへの円滑なモニター導入を支援します。

10bit 8bit 推奨
10bit 8bit 対応

	MX315W	MX243W	MX217	MX194	MS236WT-A	バス	対応OS	メモリ	表示階調 / 色	出力端子	付属変換ケーブル	最大同時出力画面	最大消費電力	占有スロット	筐体	外観寸法
MED-XN51LP	10bit8bit	10bit8bit	10bit8bit	10bit8bit	8bit	PCI-Express x16	Windows 11 [*] / 10 / 8.1 / 7	4 GB	10-bit (DisplayPort), 8-bit	Mini DisplayPort x 4 (デジチェーン対応)	Mini DisplayPort - DisplayPort x 2, Mini DisplayPort - DVI-D	4画面	47 W	1	フルハイト・ロープロファイル 両用	150.0 x 68.9 mm
MED-XN31LP	10bit8bit	10bit8bit	10bit8bit	10bit8bit	8bit	PCI-Express x16	Windows 11 [*] / 10 / 8.1 / 7	2 GB	10-bit (DisplayPort), 8-bit	Mini DisplayPort x 3 (デジチェーン対応)	Mini DisplayPort - DisplayPort x 2, Mini DisplayPort - DVI-D	4画面	30 W	1	フルハイト・ロープロファイル 両用	149.9 x 68.9 mm

※ Windows 11はドライバにて対応可能。ドライバはEIZO Webサイトからダウンロード、もしくは最寄りの営業所までお問合せください。
・上記グラフィックスボードはRadiForce専用ドライバで動作確認をしています。 ・一部のワークステーション、PCとの互換性情報をEIZO Webサイトに掲載しています。 ・最新の対応状況や、使用上の注意、 上記以外のグラフィックスボードについてはEIZO Webサイトをご確認ください。

アクセサリ

	MX315W	MX243W	MX217	MX194	MS236WT-A
読影室向け間接照明 RadiLight	○	○	○	—	—
壁掛けアーム AAH-02B3W	—	○	○	○	—
液晶保護パネル Panel Protector	—	—	RP-915	FP-702	—
モニタークリーニングキット ScreenCleaner	○	○	○	○	○

・最新の対応状況や、使用上の注意、上記以外のアクセサリについてはEIZO Webサイトをご確認ください。

読影室向け間接照明

RadiLight™

液晶モニターRadiForceの背面に簡単に取付けできる照明キット



仕様

カラーバリエーション	ブラック
電源	USBポート給電
質量	370 g
外観寸法 (幅×高さ×奥行)	184 x 185.5 x 15.7 mm
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CE, IEC60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, WEEE
主な付属品	専用電源ケーブル、取扱説明書、取付金具、スペーサー、取付用ねじ

柔らかい光で放射線科医の疲れ目に配慮

RadiLightは、液晶モニター背面に簡単に取付けできる照明キットです。背面の壁を照らすことで室内の明るさを確保するため、画面への映り込みがなく、読影作業の妨げになりません。暗い部屋で明るい画面を見続けることによる目の負担の軽減につながります。



背面照明RadiLight Areaは、明るさを10段階で調整可能

目にやさしいフリッカーフリー

「ちらつき」をカットした目にやさしいライトです。



手元を照らすスポットライト

書類の読み書きやキーボード操作時に手元を照らす手元照明RadiLight Focusも付属しています。



取付け簡単

モニターの背面スタンド部に簡単に取付け可能で、卓上に設置場所を必要としません。



取付けイメージ

導入事例はこちら： <https://www.eizo.co.jp/solutions/solution/medical/oitasekijyui/>

小型端末取付用VESAアダプタ

PCSK-R1

小型PCをスタンド背面に取付けられるVESAアダプタ




仕様

カラーバリエーション	ブラック
外観寸法 (幅×高さ×奥行)	216 x 268.5 x 138.6 mm
本体質量	0.68 kg
取付け穴ピッチ (VESA規格準拠)	100 x 100 mm, 75 x 75 mm

クライアント端末とモニターを、すっきり一体化

小型PCや仮想デスクトップ用のクライアント端末（シンクライアント）をモニタースタンドの背面部に簡単に取付けできる専用アダプタです。従来必要だったPCなどの設置場所が不要になり、机上スペースを有効に使えます。

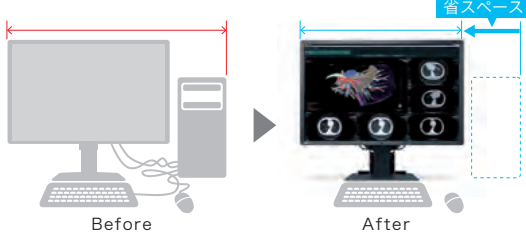

映像表示・転倒安全性を検証済みで、導入も安心

EIZO RadiForceモニターとワークステーションとの映像表示確認を実施。ワークステーションをPCSK-R1で取付けた状態での転倒安全性も検証済みです。お客様のスムーズな導入を支援します。

・互換性情報についてはこちら： <https://www.eizo.co.jp/support/db/products/compatibility/>

背面まで美しく調和

RadiForceモニターは、読影作業に集中しやすいように黒色を配しています。そのモニターに合わせて、PCSK-R1も黒色で用意。背面すべてを黒色に統一でき、モニターが設置される空間のトータルコーディネートを実現します。




互換性検証済み

- ✓ 正常に映像表示・動作することを確認
- ✓ 取付けた状態での転倒安全性を確認

あらゆる市場にEIZO



FlexScan
ビジネス・エンタープライズ

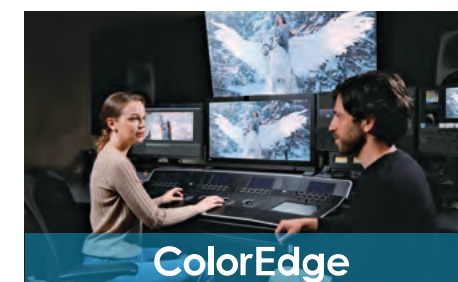

ColorEdge
クリエイティブワーク



CuratOR / RadiForce
ヘルスケア



DuraVision
監視・セキュリティ / 鉄道 / 船舶



Raptor / Re/Vue / SafeGuard
航空管制

50年以上の実績

Visual
Technology
Company



100%自社開発



100%自社生産



徹底した品質管理




カスタム対応



グローバル体制

革新的なソリューション

測色センサー内蔵で色管理を自動化

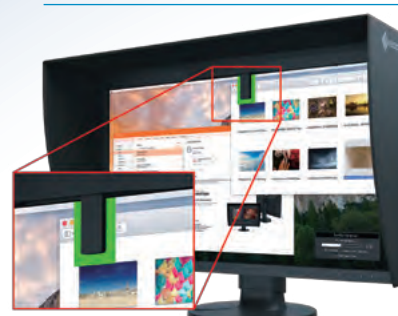

IPカメラを直接接続、同時表示



見える安心を提供する独自技術



超高感度カメラ

視認性向上システム

ネットワークでモニターを一括管理



航空管制


クリエイティブワーク

ヘルスケア

作業を効率化するソフトウェア



1つのマウスで2台のPCを自在に操作

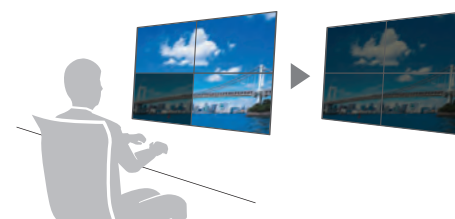

マルチモニターの一括制御



画面と写真プリントを簡単色合わせ

 **安全に関するご注意** | 正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 | この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■EIZO、EIZOロゴ、RadiForce、RadiCS、RadiNET、CuratOR、FlexScan、ColorEdge、DuraVision、RaptorはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■Re/Vue、RadiLight、ScreenCleanerはEIZO株式会社の商標です。■DICOMは、National Electrical Manufacturers Associationが所有する、医用情報のデジタル通信に関する規格の登録商標です。■DisplayPort、DisplayPort コンプライアンスロゴ、VESA は、Video Electronics Standards Association の米国およびその他の国における商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■その他の会社名、商品名およびロゴマークは各社の商標または登録商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■海外でのご使用につきましては、下記へお問合せください。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品は店頭販売しておりません。詳しくは下記へお問合せください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。■掲載製品は医療機器ではありません。

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

<https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せ 受付時間 月～金 9:30～17:00(祝日、当社休業日を除く)

ヘルスケア営業部 03-5764-3403

札幌営業所 011-737-6601

仙台営業所 022-212-8751

名古屋営業所 052-232-7701

北陸営業所 076-277-6790

大阪営業所 06-4807-7707

広島営業所 082-535-7701

高松営業所 087-869-0877

福岡営業所 092-715-7706