

## 複数の医療施設のモニターを一元管理する ネットワーク品質管理ソフトウェア新発売


### 1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、インターネット経由でモニターの品質を一元管理する系列医療施設向けネットワーク品質管理ソフトウェア RadiNET Pro Enterprise(オープン価格※)を2008年5月1日より発売します。

医療の現場では、フィルムレス環境の高まりにより、モニターの導入が急速に進んでいます。このような中、経年劣化するモニターの輝度や画面の均一性を補正し、長期にわたって常に安定した画像表示を保つためには、モニターの継続的な品質管理がますます重要になってきています。また、院内に増えていくモニターをすべて管理するには、1台あたりの管理工数を削減することが急務であり、簡単かつスピーディにモニター品質管理を行えるソリューションのニーズがますます高まっています。

当社はこれまで、大規模病院向けネットワーク品質管理ソフトウェア RadiNET Pro を発売し、病院全体のモニターの品質を管理者が一括管理するソリューションを数多くの施設に導入してきました。今回発表の RadiNET Pro Enterprise はそのグレードアップモデルです。1台のサーバから、サーバを設置している院内だけでなく、距離の離れた系列医療施設内のモニターまでもインターネットを経由して管理でき、使用する全モニターの品質維持管理の一元化を実現します。

※オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

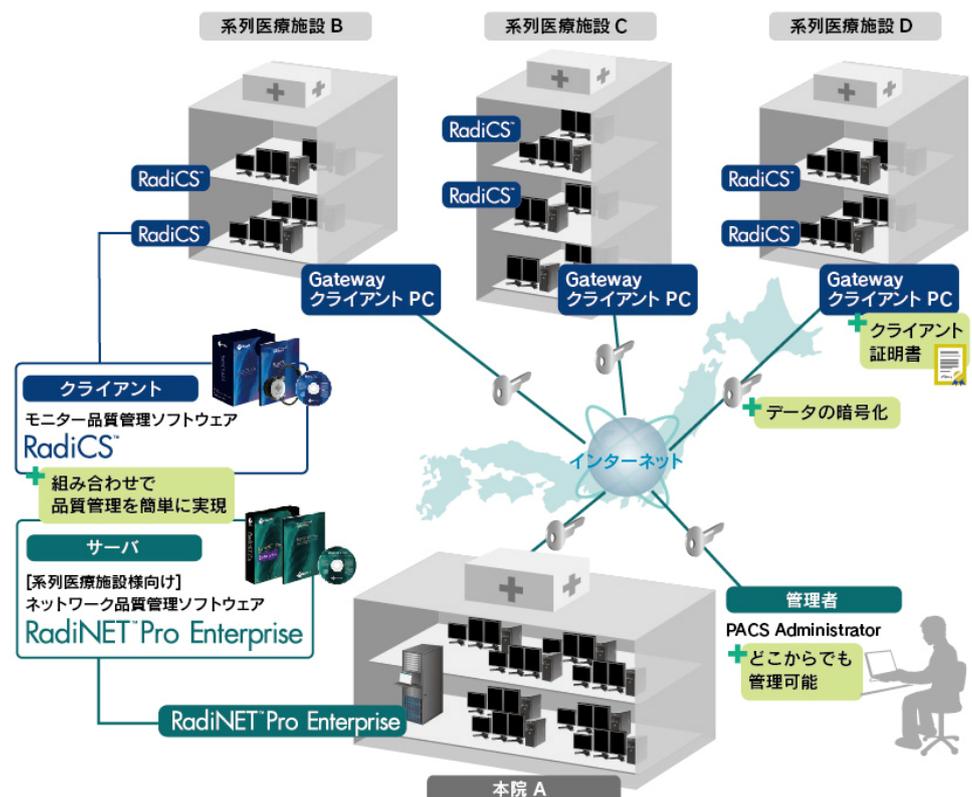

## 2. 主な特長

- ・ モニター品質管理ソフトウェア RadiCS との組み合わせによる高度な品質管理を簡単に実現
- ・ 1 施設に設置するサーバ 1 台で複数の医療施設内で使用する全モニターを管理可能
- ・ 最大 30,000 台のモニターを管理可能
- ・ Web ベースアプリケーションによるインターネット経由の管理なので、管理者は医療施設内外どこからでも管理可能
- ・ リモート制御など RadiNET Pro と同じ機能をすべて実行可能
- ・ クライアント証明書がインストールされている PC だけがサーバにアクセス可能なのでセキュリティ管理も万全
- ・ 大切なデータを SSL(Secure Sockets Layer Protocol)で暗号化し送受信することでプライバシーの安全性を確保
- ・ 系列医療施設のグルーピング・階層化により、ユーザのデータへのアクセス・レベルを制御しセキュリティを確保

## 3. 用語解説

### RadiCS

各クライアントモニターの品質維持・管理をキャリブレーションから、受入試験、不変性試験、資産管理までトータルにサポートするモニター品質管理ソフトウェアです。JESRA などの各規格に対応した高度な品質管理を、簡単でわかりやすい手順で実現します。



- ・ ユーザーフレンドリーなインターフェース
- ・ DICOM Part 14 に準拠した高性能なキャリブレーション
- ・ モニターの画質を厳格にチェック
- ・ キャリブレーションや各試験データの履歴管理
- ・ JESRA に対応したサポート運用が可能

### RadiNET Pro / RadiNET Pro Lite

ネットワークによりモニターの品質維持を一元管理するネットワーク品質管理ソフトウェアです。RadiNET Pro は最大 8,000 台のモニターを管理できる大規模病院様向け、RadiNET Pro Lite は最大 200 台のモニターを管理できる小・中規模病院様向けです。




- ・ 病院内に分散するすべてのモニターを一元管理
- ・ 病院のどこからでも管理できる Web ベースアプリケーション
- ・ モニター情報のレポートを簡単に作成
- ・ 管理者の利便性を高めるリモート実行
- ・ モニターの変化をアラートメールでお知らせ
- ・ RadiForce モニター以外のモニターもサポート
- ・ 不正使用を監視するセキュリティも万全



## RadiForce

CR や DR、CT などの医用画像表示や、PACS やモダリティコンソール用など病院内の各種用途でご利用いただける医用画像表示モニターです。

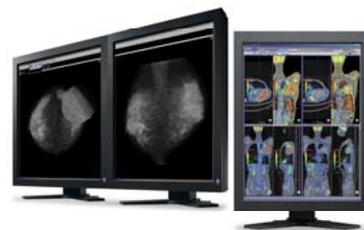

本製品は医療機器ではありません。RadiCS、RadiNET は株式会社ナナオの商標です。EIZO、RadiForce は株式会社ナナオの登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。画面はハメコミ合成です。 Copyright © 2008 株式会社ナナオ All rights reserved.

### 【 お客様からのお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ 営業1部 メディカル課

TEL: 03-5715-2014(代) FAX: 03-3458-7001

ホームページ: <http://radiforce.com/jp/>

### 【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ マーケティング部 販売促進課

TEL: 076-277-6795 FAX: 076-277-6796 E-Mail: [press@eizo.co.jp](mailto:press@eizo.co.jp)

ホームページ: <http://www.eizo.co.jp/press>