




医療映像の視聴・管理・編集を円滑に。利活用を促進。

NASや外部メディアに記録した医療映像を、医局やカンファレンスルームのPCで視聴・編集するためのソフトウェアです。録画時に入力した各種患者情報も合わせて読み込めるため、映像の管理にも役立ちます。患者説明や医学研究、後進育成における手術映像などの二次利用を支援します。

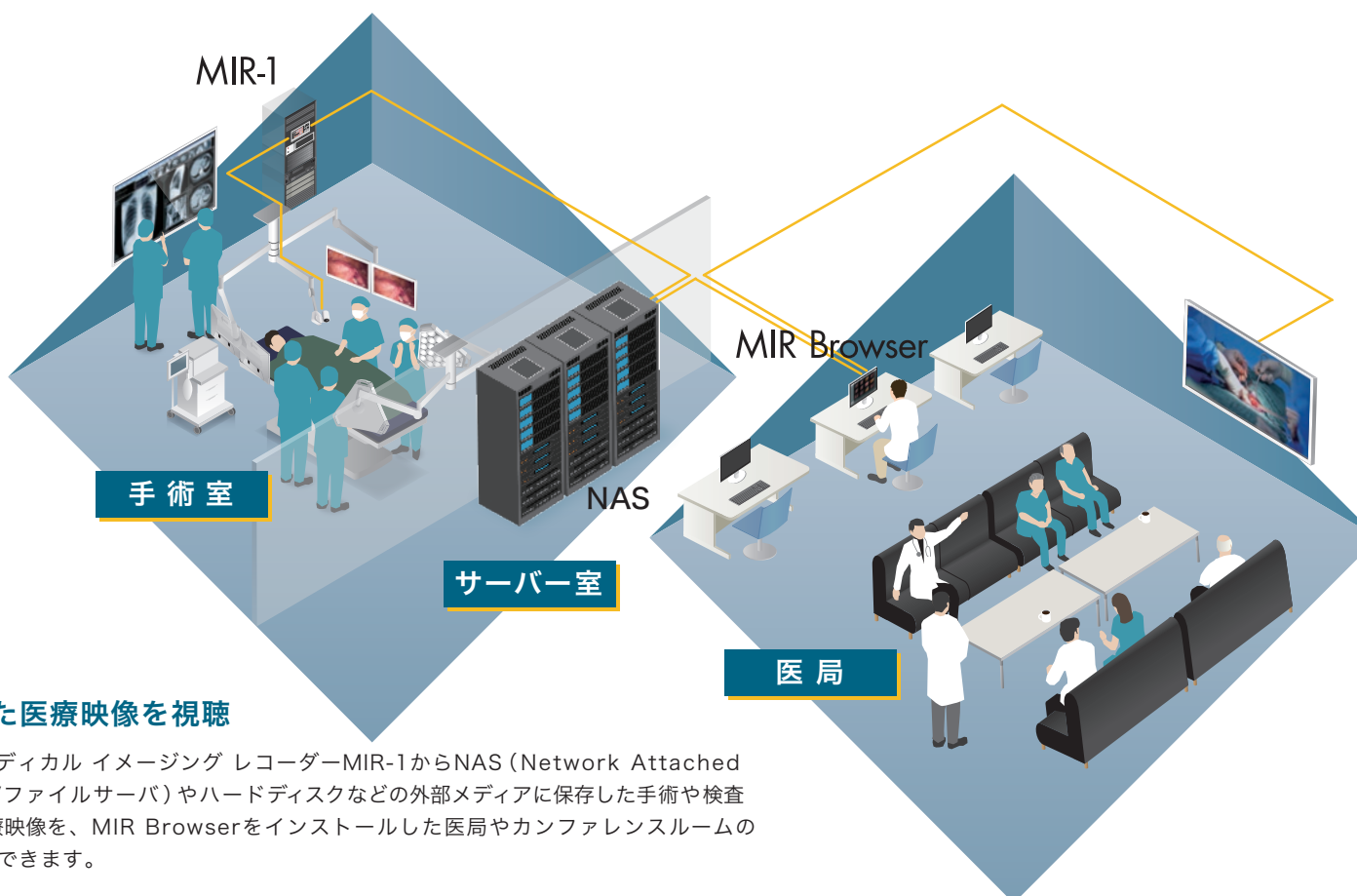

記録した医療映像を視聴

EIZOのメディカル イメージング レコーダーMIR-1からNAS (Network Attached Storage/ファイルサーバ) やハードディスクなどの外部メディアに保存した手術や検査などの医療映像を、MIR Browserをインストールした医局やカンファレンスルームのPCで視聴できます。

CuratOR[®] MIR Browser

医療映像を患者情報と共に管理

MIR-1で映像の録画時に付与した患者情報を含めた医療映像の管理が可能です。患者名や患者ID、録画日時ごとに、医療映像の整理や検索が行えます。さらに、手術情報などのフリーワードをコメント入力することで、検索性を高められます。



映像をマスキングして、プライバシーに配慮

マスキング機能で、映像上で患者名など個人情報が表示されている領域を黒塗り処理で隠すことが可能です。医療映像を二次利用する際のプライバシー保護につながります。




直感的な操作で、カット編集が可能

カット編集機能で、医療映像の二次利用する部分だけを選択し、切り出して動画として保存、あるいは1フレームを静止画として保存可能。使いやすいユーザーインターフェースで、直感的な編集作業が行えます。




3D映像を2Dにして参照・共有

MIR-1で記録した3D映像のサイド・バイ・サイドあるいはトップ・アンド・ボトム信号の片方を引き伸ばして表示するレビュー再現に対応。3D映像を2Dで再生・保存できるため、録画された3D映像を3Dモニターがない環境でも参照可能にします。

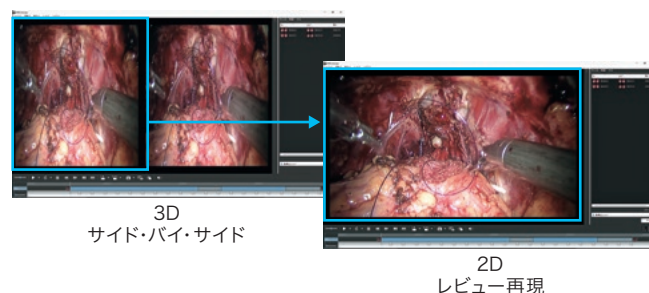

注釈付きで、映像共有の理解促進

アノテーション機能により、映像上にマウス操作で自由にマーキングやポインティングが可能。注目箇所を明確にすることで、医療映像の利活用時の理解促進に役立ちます。

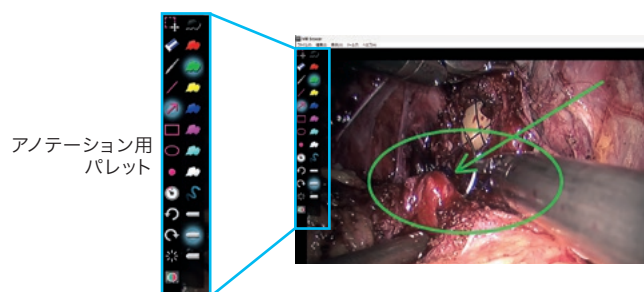

仕様

対応OS	Windows 11, Windows 10 (64-bit)
CPU	Intel® Core™ プロセッサ: 第10世代 (Comet Lake)以降
メモリ	8 GB以上
表示解像度	1920 x 1080 以上
対応映像フォーマット	H.265, H.264

・対応フォーマット等の最新情報は、EIZO Webサイトをご覧ください。
<https://www.eizo.co.jp/products/curator/mir-browser/>

■EIZO、EIZOロゴ、CuratORは、EIZO株式会社の日本及びその他の国における登録商標です。■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■Intel、Intel Coreは Intel Corporationの米国および/またはその他の国における商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の登録商標または商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■海外でのご使用につきましては、下記へお問合せください。■外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品は店頭販売しておりません。詳しくは下記へお問合せください。■画面はハメコミ合成です。■増載製品は医療機器ではありません。

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

<https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せ 受付時間 月～金 9:30～17:00(祝日、当社休業日を除く)

ヘルスケア営業部 03-5764-3403

札幌営業所 011-737-6601

大阪営業所 06-4807-7707

仙台営業所 022-212-8751

広島営業所 082-535-7701

名古屋営業所 052-232-7701

高松営業所 087-869-0877

北陸営業所 076-277-6790

福岡営業所 092-715-7706