




カラー：セレーングレイ



カラー：ブラック

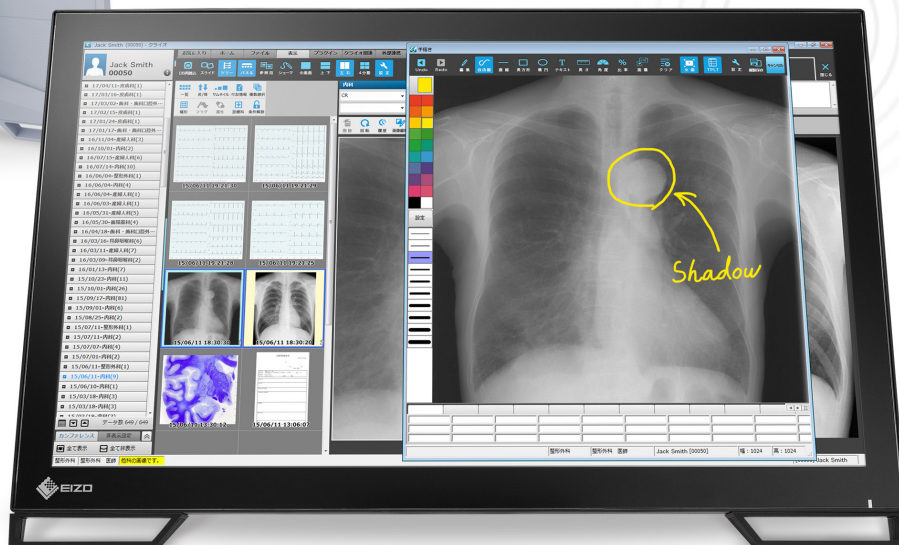

付属タッチペン TP5

細やかなペン入力が可能で、簡易DICOM®モード搭載の 23型マルチタッチ電子カルテ画像表示モニター

スタイラスペン対応で、なめらかな書き味


投影型静電容量(PCAP)方式採用で、画面の透過率が良く、ドラッグやフリックなど指でのタッチ操作がスムーズです。また、付属のパッシブ方式のタッチペン入力に加え、アクティブ方式のスタイラスペンを使った入力にも対応。電子カルテ上に、文字やシェーマ（図式）など細やかな入力も可能です。



誤動作なく、手をついたまま書ける

指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効化し、手の側面がタッチパネルに触れた状態で操作する場合において誤入力を防ぐ「パームリジェクション機能」を搭載。マルチタッチの誤動作を防ぎ、書くことに集中できます。

・パームリジェクション機能は 2×2 cm以上の面積で有効となります。

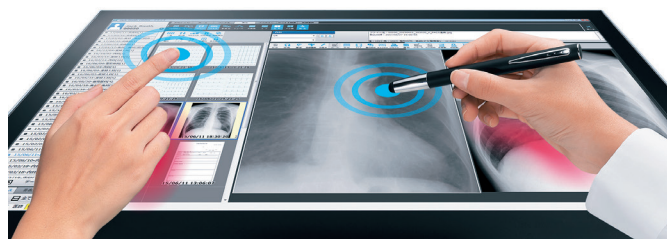

市販のアクティブ方式のスタイラスペンを含む、複数のスタイラスペンと互換性検証済みです。

<https://www.eizo.co.jp/i/stylus/>

RadiForce MS236WT-A

医用画像を簡易DICOM表示

簡易DICOMモードを搭載し、放射線画像などDICOM Part 14形式で保存されている医用画像データを適切な階調で表示します。

タッチ操作が快適なフルフラットデザイン

ベゼル（画面の外枠）に凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作しやすく、ドラッグやフリック等のスライド操作も滑らかに行えます。液晶画面に付いたホコリや指紋の汚れも拭き取りやすく、清潔に保つことができます。

高い堅牢性

タッチ表面は傷がつきにくい、表面硬度5Hの堅牢性を持つガラス構造です。長期に渡り安心してお使いいただけます。

タッチパネルの有効／無効を一発切替え

モニター側面のボタンで、タッチパネル機能の有効／無効を簡単に切替えられます。モニター未使用時や清掃時の誤作動を防げます。

速やかなリカバリ対策

投影型静電容量(PCAP)方式のタッチパネルは、環境要因や電極ノイズの影響で、誤作動を起こす場合があります。感度調整機能を搭載したMS236WT-Aは、システムを稼働したまま、モニター単体でリカバリ可能です。

・初回設置時は、付属の「TPOffset（タッチパネルの感度調整用ソフトウェア）」を使った調整が必要です。

ちらつきを抑制し、目に優しい

低輝度に調整した際、画面のちらつきが発生しにくい調光方式を採用。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。

豊富な入力端子で、さまざまなPCと接続可能

抜き差ししやすいモニター側面に、DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力端子を搭載し、さまざまなPCと接続できます。

好みの角度で快適に使える


レイドバックスタンドモデルは、広範囲にチルト角を調整できます。タッチ操作では立てて、タッチペン操作では寝かせるなど、使い方にあった作業しやすい画面角度で作業できます。

仕様

製品バリエーション		MS236WT-ALGY: スタンドあり, セレーングレイ MS236WT-ALBK: スタンドあり, ブラック MS236WT-AFGY: スタンドなし, セレーングレイ MS236WT-AFBK: スタンドなし, ブラック
パネル	種類	カラー (IPS)
	バックライト	LED
	サイズ	23.0型 (58.0 cm)
	推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
	表示領域 (横 x 縦)	509.2 x 286.4 mm
	画素ピッチ	0.265 x 0.265 mm
	表示色	8-bit 約1677万色 (約10億6433万色中 / 10-bit)
	視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178° / 178°
	輝度 (標準値)	260 cd/m ²
タッチ パネル	コントラスト比 (標準値)	1000:1
	応答速度 (標準値)	11 ms (中間階調域)
	方式	投影型静電容量
	同時タッチ点数	10
	表面処理	アンチグレア
	通信方式	USBシリアル転送
	表面硬度	5 H
	対応OS	Windows 11, Windows 10 / 8.1 (64-bit, 32-bit)
映像信号	入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz
	アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
	同期信号	セパレート
	コンピュータ接続 (アップストリーム) USBハブ (ダウンストリーム)	USB 3.1 Gen 1: Type-B USB 3.1 Gen 1: Type-A x 2
音声	スピーカー	1.0 W + 1.0 W
	入力端子	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI
電源	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	標準消費電力	15 W
	最大消費電力	47 W
	節電時消費電力	0.5 W以下
主な機能	表示モード	User 1, User2, sRGB, DICOM
機構	質量	約6.6 kg
	質量 (モニター部)	約6 kg
	取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況については お問合せください。)		CE / UKCA (Medical Device), ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1, IEC/EN60601-1, PSE, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)
FDA		Class I
主な付属品	映像信号ケーブル	DisplayPort (2m), HDMI (2m)
	その他 (ユーティリティディスクの内容 は変更となる場合があります。)	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), タッチペン, タッチペンホルダー, ユーティリティディスク (取扱説明書, タッチパネルドライバ, TPOffset), クリーニングクロス, 保証書付き取扱説明書, 意匠シート x 2 (MS236WT-AL), VESA マウント用取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4 (MS236WT-AF), ケーブルクランパー
保証期間		3年間

・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、EIZO Webサイトをご覧ください。
<https://www.eizo.co.jp/company/csr/2/product/label/jmoss/>

寸法図(単位: mm)

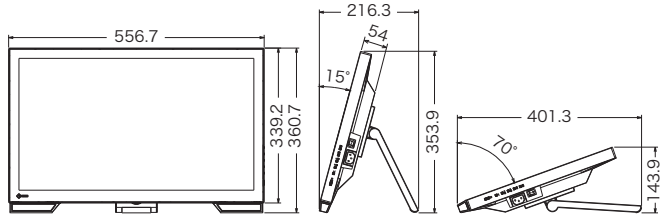

 安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。
---	--------------------------------------	--

■EIZO、EIZOロゴ、RadiForce、RadiCSは、EIZO株式会社の日本及びその他の国における登録商標です。■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。■DICOMは、National Electrical Manufacturers Associationが所有する、医用情報のデジタル通信に関する規格の登録商標です。■HDMIは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標です。■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の登録商標または商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■海外でのご使用につきましては、下記へお問合せください。■外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品は店頭販売していません。詳しくは下記へお問合せください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフをすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。■掲載製品は医療機器ではありません。

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

<https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せ 受付時間 月～金 9:30～17:00(祝日、当社休業日を除く)

ヘルスケア営業部 03-5764-3403

札幌営業所 011-737-6601

大阪営業所 06-4807-7707

仙台営業所 022-212-8751

広島営業所 082-535-7701

名古屋営業所 052-232-7701

高松営業所 087-869-0877

北陸営業所 076-277-6790

福岡営業所 092-715-7706