



医用画像表示モニター
RadiForce® RX440





4MP RadiForce[®] RX440


2メガピクセル×2台分にあたるに400万画素の情報量を、1台のワイド大画面にベゼルレスで表示可能な4メガピクセル医用画像表示カラーモニターです。

- 環境に優しいLEDバックライト採用で長寿命化と省電力化を実現
- 工場にて1台1台階調特性を調整しDICOM Part 14に準拠することで医用画像を忠実に再現
- 同一画面内のモノクロとカラー画像の表示エリアを自動判別し、それぞれに最適な輝度と階調で再現するEIZO独自の技術Hybrid Gamma機能搭載
- モニター内蔵のIntegrated Front SensorでDICOM Part 14準拠のキャリブレーションを簡単に実行
- PbyP(ピクチャー・バイ・ピクチャー)機能あるいは、PinP(ピクチャー・イン・ピクチャー)機能で、1画面上に2つの異なる入力信号を同時に表示可能

製品バリエーション	RX440:アンチグレアパネル仕様 RX440-AR:ARコーティング仕様
キャビネットカラー	ブラック
パネル種類	カラーTFT液晶パネル(IPS方式)
バックライト	LED
パネルサイズ	76 cm(29.8)型(可視域対角 75.6 cm)
推奨解像度	2560 × 1600
表示面積(横×縦)	641.2 × 400.8 mm
画素ピッチ	0.2505 × 0.2505 mm
表示色	10 bitカラー(DisplayPort接続のみ):最大10億7,374万色 8 bitカラー:1,677万色(約680億色中)
視野角(水平/垂直、標準値)	176° / 176°
輝度(標準値)	750 cd/m ²
キャリブレーション推奨輝度	400 cd/m ²
コントラスト比(標準値)	1100:1
応答速度(標準値)	20 ms(黒→白→黒)
入力端子	DVI-D(Dual Link) × 1、DVI-D(Single Link) × 1、 DisplayPort × 1
デジタル走査周波数 (水平/垂直)	水平 31~159 kHz / 垂直 29~61 Hz(VGA TEXT時 69~ 71 Hz) フレーム同期モード対応: 59~61 Hz、29.5~30.5 Hz
USB機能	アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 2
USB規格	USB 2.0
電源入力	AC 100-120 / 200-240 V ± 10 %、50 / 60 Hz
最大消費電力	167 W
標準消費電力	84 W
節電時消費電力	0.7 W以下
省電力設定	DVI DMPM、DisplayPort 1.1a
内蔵センサー	バックライトセンサー、Integrated Front Sensor、人感センサー、照度センサー

質量	20.2 kg
質量(モニター部)	16 kg
フリーマウント穴ピッチ(VESA規格)	200 × 100 mm、100 × 100 mm
適合規格 (最新の適合状況については お問合せください。)	JESRA X-0093(管理グレード1)、CE(Medical Device Directive)、EN60601-1、UL60601-1、CSA C22.2 No. 601-1、IEC60601-1、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、C-tick、RoHS、中国版RoHS、WEEE、J-Moss グリーンマーク [※] 、CCC、GOST-R
FDA 510(k) Clearance	申請中(for General Radiography)
主な付属品	2芯アダプタ付電源コード、Dual Linkモニターケーブル (DVI-D~DVI-D)、モニターケーブル(DisplayPort~ DisplayPort)、USBケーブル、ユーティリティディスク(RadiCS LE、ScreenManager Pro for Medical、取扱説明書)、出荷試 験報告書、保証書
保証期間	5年間

寸法図(単位:mm)

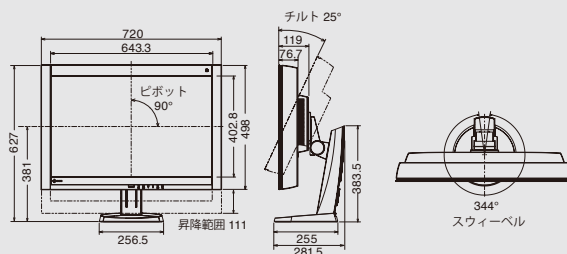

※ J-Moss グリーンマークの詳細はhttp://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/index.htmlを参照ください。



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

● EIZO、RadiForce、RadiCS、RadiNET、ScreenManagerは株式会社ナナオの登録商標です。● Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。● その他の会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。● 外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。● 製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。● 本製品は店頭販売していません。詳しくは下記へお問い合わせください。● 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。● 画面はハモコミ合成です。● 掲載製品は医療機器ではありません。



EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

www.eizo.co.jp

製品に関するお問い合わせ 営業時間 月~金 9:30~17:30(祝日、弊社休業日を除く)

営業1部メディカル課 03-5715-2014

仙台営業所 022-212-8751 名古屋営業所 052-232-7701 北陸営業所 076-277-6790
大阪営業所 06-4807-7707 広島営業所 082-535-7701 福岡営業所 092-715-7706

Copyright © 2012 EIZO NANO CORPORATION. All rights reserved. Printed in Japan, 11, 2012, 3K (1211103)